


## DIALKOVÉ OVLÁDANIE

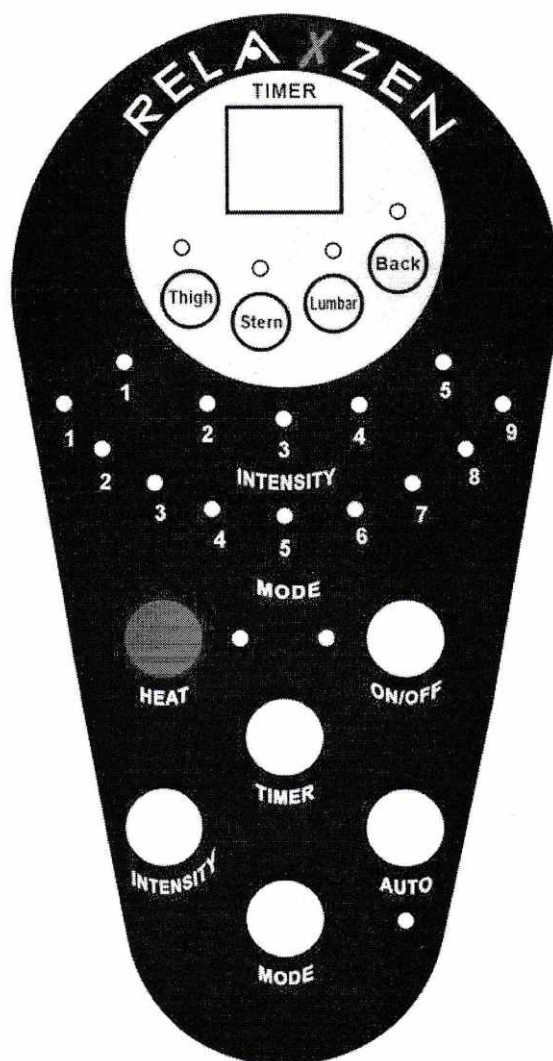

### ZOZNAM POUŽITÝCH VÝRAZOV:

ANGLICKY	SLOVENSKY
TIMER	ČASOVAČ
THIGH	PODNOŽKA
STERN	STEHENNÁ ČASŤ
LUMBAR	BEDERNÁ OPIERKA CHRBTICE
BACK	OPIERKA CHRBTICE
INTENSITY	INTENZITA
MODE	PROGRAM
HEAT	OHRIEVANIE
ON / OFF	ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ
AUTO	AUTOMATICKÁ MASÁŽ

## INFORMÁCIE O VÝROBKU

- 8 Vibračných motorov ( 4 na opierke, 2 na sedáku, 2 na podnožke )
- 4 Masážne programy
- Regulovateľná intenzita
- Štyri masážne zóny, každú zónu je možné ovládať individuálne
- Predvolené časovanie je 25 min

## POUŽITIE

- 1、 Zasuňte konektor adaptéra do zásuvky, ktorá sa nachádza na zadnej strane masážneho vankúša, potom zapojte adaptér do zásuvky v stene (pozri obrázok A)

Obrázok A



- 2、 Zapnite ovládač stlačením tlačítka POWER ON, po zapnutí bude svietiť svetelná kontrolka.
- 3、 Zapnite masáž v každej zóne stlačením tlačítiek BACK (CHRBTICA), LUMBAR (BEDROVÁ ČASŤ), STERN (STEHENNÁ ČASŤ) alebo THIGH/LEGS (PODNOŽKA). V prípade, že svetelné kontrolky svietia, masážna zóna je aktivovaná. Opätovným stlačením tlačítka zónu vypnete.
- 4、 Masážny program si zvolíte tlačítkom MODE (PROGRAM). Pre zmenu programu stlačte jedno z programovacích tlačítiek, pri zvolenom programe bude svietiť svetelná kontrolka.  
HEAT --- ohrievanie  
TIMER—nastavenie času trvania masáže  
AUTO--- spustí sa masáž vo všetkých zónach
- 5、 Tlačítkom INTENSITY (INTENZITA) si zvolíte intenzitu masáže. Pri zvolenom tlačítku bude svietiť svetelná kontrolka.  
UPOZORNENIE: V prípade, že sa cítite nepohodlne alebo cítite bolesť, ihneď masáž prerušte.
- 6、 UPOZORNENIE: pre Vašu bezpečnosť je kreslo vybavené automatickým vypínačom, ktorý preruší masáž po 25 minútach nepretržitého používania.

7、 NEPOUŽÍVAJTE nepretržite viac ako 25 min.

### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri použití akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, vrátane nasledujúcich:

- 1、 Tento výrobok je určený pre použitie pod transformovaným napätím 12V. Ubezpečte sa, že kreslo je pripojené do koncovky s rovnakými parametrami.
- 2、 Po použití a pred čistením masážny prístroj VŽDY odpojte z elektrickej siete.
- 3、 Nedotýkajte sa masážneho prístroja v prípade, že došlo k styku produktu s vodou. Ihneď vytiahnite zo zásuvky.
- 4、 Prístroj nikdy nenechajte bez dozoru, ak je zapojený do elektrickej siete. Ak prístroj nepoužívate alebo ak montujete / demontujete niektorú časť, vytiahnite ho zo zásuvky.
- 5、 Nepoužívajte v exteriéri.
- 6、 Nepremiestňujte kreslo ťahaním za káble.
- 7、 Nedávajte káble na zohriate povrchy.
- 8、 Ak prístroj používajú deti, invalidi alebo handicapovaní ľudia, nenechajte ich bez dozoru.
- 9、 Tento prístroj nie je hračka. Deti by ho nemali používať, či hrať sa s ním.
- 10、 Nepoužívajte tento výrobok v priestoroch s vysokou koncentráciou aerosolov (sprejov) ani v priestoroch s vysokou koncentráciou molekúl kyslíka.
- 11、 Nepoužívajte blízko očí alebo iných veľmi citlivých častí.
- 12、 Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačítko POWER OFF a uistite sa, že všetky funkcie sú vypnuté. Potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- 13、 Nedávajte káble na zohriate povrchy.
- 14、 Tento prístroj používajte len tak, ako je to uvedené v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou tohto prístroja.

### ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE

- Ak máte nejaké zdravotné ťažkosti, pred použitím prístroja sa poraďte s lekárom.
- Osoby s kardiostimulátorom by tento prístroj nemali používať.
- Ak dlhší čas pocítujete bolesť v svaloch alebo v kĺboch, prestaňte prístroj používať a

poradíte sa s lekárom. Pretrvávajúca bolesť môže byť príznakom oveľa vážnejšieho stavu.

## ÚDRŽBA

### SKLADOVANIE:

Dajte prístroj do pôvodného obalu alebo na bezpečné, suché, studené miesto. Predchádzajte kontaktu s ostrými alebo špicatými predmetmi, ktoré by mohli čalúnenie porezať alebo prepichnúť.

### ČISTENIE:

- Uistite sa, že prístroj je odpojený z elektrickej siete a nechajte ho pred čistením vychladnúť.
- Pri čistení nenamáčajte prístroj do žiadnej tekutiny. Povrch len pretrite navlhčenou špongiou; používajte len jemné saponáty alebo mydlovú vodu. Osušte čistou suchou hadričkou.
- Nepoužívajte na čistenie prístroja drsné čistiace prostriedky, kefy, benzín, petrolej, leštidlo na nábytok / sklo, riedidlo na farbu alebo vodu teplejšiu ako 45 °C
- Pred čistením prístroja sa uistite, že je odpojený z elektrickej siete. Nepoužívajte žiadne silné chemické čistiace prostriedky.