

Instrucțiuni de utilizare




Înainte de a utiliza cântarul citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni



Pentru a descărca aplicația, vă rugăm să scanați acest cod QR

1. Prima utilizare

Acest dispozitiv este alimentat de trei baterii AAA de 1,5 V. Când introduceți baterii noi, asigurați-vă că sunt introduse cu polaritate corectă și de faptul că, capacul bateriei este bine pus la loc.

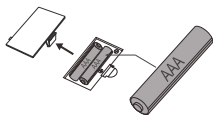

2. Calibrarea

Calibrarea este necesară dacă utilizați cântarul pentru prima dată, sau dacă l-ați mutat. Cântarul porniți prin apăsare în mijlocul lui, și așteptați până când pe ecran apare zero (0,0). Apoi vă puneți pe cântar și vă puteți cântări. Dacă cântarul rămâne în același loc, nu sunt necesare alte setări. Dacă doriți să vă cântăriți din nou, pur și simplu vă puneți din nou pe cântar.

3. Avertizare



Persoanele cu stimulator cardiac sau cu un alt tip de dispozitiv medical nu ar trebui să utilizeze acest produs, deoarece metoda de măsurare poate interfera buna funcționare a acestuia. Nu recomandăm femeilor însărcinate să utilizeze acest produs, pentru analiza corpului. Acest produs este potrivit pentru adulți și copii de la 10 ani

Sfaturi pentru operare și întreținere

- Cântarul are memorie pentru 8 utilizatori
- Așezați cântarul pe o suprafață fermă și plană.
- Evitați covorul sau suprafețele moi.
- Cântarul nu este rezistent la apă. Nu-l expuneți la umezeală.
- Curățați cântarul cu o lavetă ușor umedă.
- Nu folosiți detergenți chimici sau agenți de curățare abrazivi.
- Dacă nu veți utiliza cântarul pentru o mai lungă perioadă de timp, scoateți bateriile din ea.
- Copiii nu au voie să se joace cu cântarul.



4. Descriere

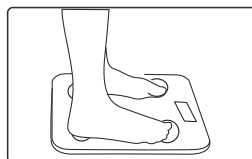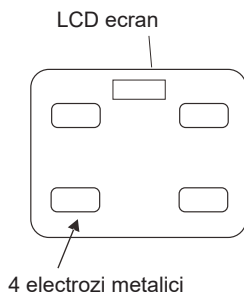

Scoateți-vă pantofii și șosetele și păstrați astfel un contact bun între picioarele goale și electrozii metalici

5. Parametri tehnici

- 5-1. Greutate maximă: 200 kg / 440 lb / 31st: 7 lb
- 5-2. Greutate minimă: 5 kg / 11 lb
- 5-3. Precizie de cântă: 0,1 kg/0,2 lb/1 lb
- 5-4. Indicație de suprasarcină: **Err**
- 5-5. Indicație baterii descărcate: **Lo**
- 5-6. Eroare de impedanță: Err1, soluția se regăsește în capitoul „12. Rezolvarea problemelor „..
- 5-7. Număr de utilizatori în memorie: 8 persoane
- 5-8. **(fat)** Măsurarea proporției de grăsime corporală: 5 % ~ 50 %
- 5-9. **(TBW)** Măsurarea proporției de apă din corp: 10 % ~ 80 %
- 5-10. **(MUS)** Măsurarea proporției de masă musculară din corp: 10 % ~ 80 %
- 5-11. **(BONE)** Măsurarea fracției osoase: 0,5 kg ~ 8,0 kg
- 5-12. **(BMI)** Parametrul indicelui de masă corporală
- 5-13. **(KCAL)** Necesarul zilnic de calorii
- 5-14. **Pornire:** Puneți-vă pe cântar, cântarul se pornește automat
- 5-15. **Oprire automată:** Dacă nu utilizați cântarul mai mult de 10 secunde, acesta se oprește automat.



6. Utilizați cu sistemele de operare enumerate mai jos



iOS 8.0



Android 4.3

7. Aplicația (AiFit)

Cântarul poate fi conectat la aplicație prin Bluetooth. Aplicația **AiFit** pentru Android și iOS este disponibilă în magazinele Google Play (Android) și APP Store (iOS).



De asemenea, puteți instala aplicația „**AiFit**” scanând codul QR.


8. Notă

Cântarul poate fi asociat cu multe dispozitive, dar rezultatele pot fi trimise doar către un singur dispozitiv. Dacă cântarul este utilizat de doi utilizatori, nu este posibil să fie conectat cântarul la două aplicații în același timp. Dacă doriți să selectați un alt utilizator, primul utilizator trebuie să oprească atât aplicația, cât și Bluetooth.

9. Instrucțiuni de operare

1. Porniți Bluetooth pe telefonul mobil / tabletă. Cântarul poate rămâne inactiv.
2. Porniți aplicația. Înregistrați-vă (adresa de e-mail, parola) sau conectați-vă dacă aveți deja un cont creat.
3. Aplicația va căuta automat cântarul, se va conecta la acesta și o va atribui contului dvs. De fiecare dată când veți porni cântarul, aplicația se va conecta automat dacă cântarul este aproape de un telefon mobil / tabletă.

10. Interfață

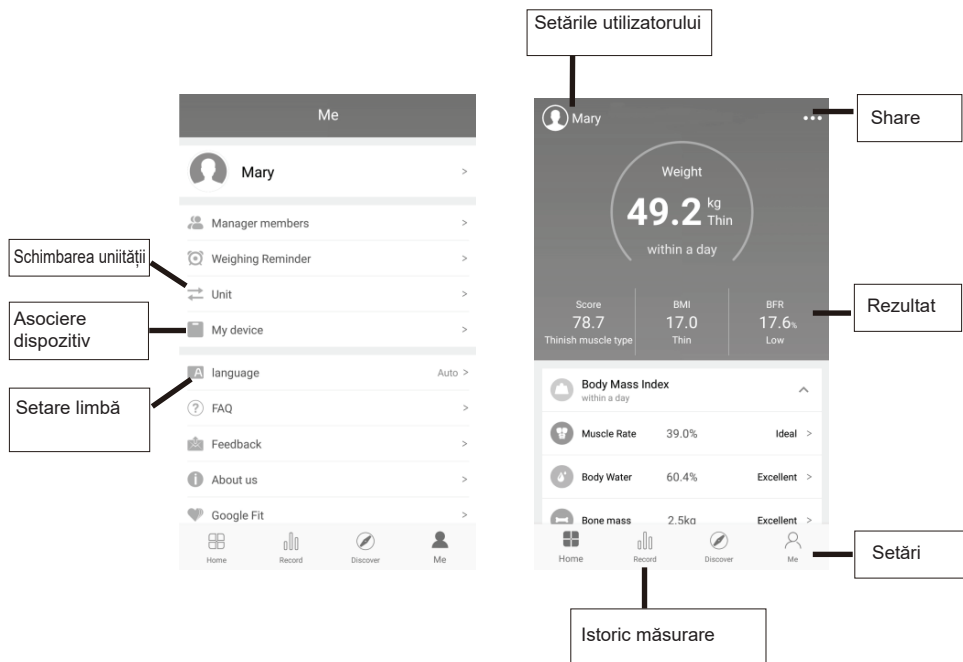

10-1. Setările utilizatorului

În setările utilizatorului puteți adăuga și edita profilul. Fiecare profil are propriul său istoric de măsurare. Cântarul poate identifica 8 profiluri de utilizatori.

10-2. Istoric măsurare

În istoricul măsurării puteți citi toate măsurătorile anterioare stocate în profil. În același timp, puteți vizualiza mediile din fiecare parametru.

10-3. Setări

Setările aplicației vă permit să adaptați aplicația la propriile nevoi: unitatea de conversie (kg / lb / st), Atenționare de cântărire, conectarea cântarului (Bind sau Unbind), actualizarea sistemului, setarea limbii etc.



Notă

Cântarul afișează toate datele imediat după prima asociere cu aplicația mobilă.


11. Cum se utilizează cântarul

11-1. Deschideți aplicația, înregistrați utilizatorul, setați informațiile despre utilizator și conectați cântarul, dacă este pornit.


11-2. După finalizarea setărilor de pe telefon, scoateți-vă pantofii și șosetele și cântăriți-vă. Asigurați un contact bun între picioarele goale și electrozii metalici. După finalizarea cântării, cântarul se oprește automat

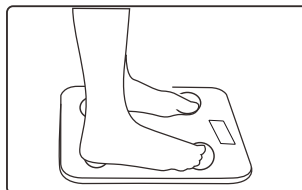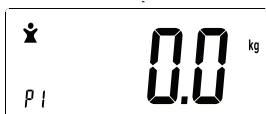


11-3. Așteptați până când indicarea greutății se stabilizează. Rămâneți pe cântar până când sunt afișate toate valorile.

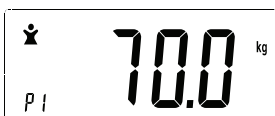

11-4. După un timp de măsurare, cele patru de „0” dispar treptat de la stânga la dreapta. Așteptați până când nu se vor afișa celelalte valori.

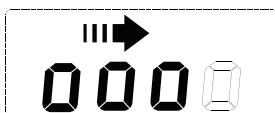

11-5. Indicațiile de măsurare sunt afișate treptat. Acum puteți coborî de pe cântar. Pe ecranul LCD se afișează greutatea corporală, BMI, procentul de grăsime corporală, procentul de apă, procentul muscular, procentul osos, kaloriile recomandate și apoi greutatea din nou. Rezultatele se vor afișa de două ori pe ecranul LCD.

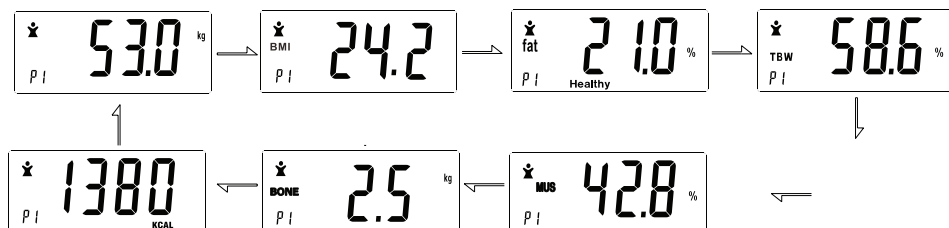

12. Rezolvarea problemelor

Dacă întâmpinați probleme în timpul utilizării cântarului, citiți informațiile din tabelul următor înainte de a contacta centrul de service.

Problemă	Cauza	Rezolvare
Cântarul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați starea bateriei.• Greutate sub 5 kg.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă nu se află baterii în cântar, introduceți-le. Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.• Greutatea minimă de măsurare este de 5 kg.
Pe ecran se va afișa Lo.	Bateriile sunt descărcate.	Înlocuiți bateriile.
Pe ecran apare Err.	Greutatea maximă posibilă a fost depășită.	Greutatea maximă admisă este de 200 kg.
Pe ecran apare Err1.	Cântarul are probleme la măsurarea cantității de grăsime din corp folosind electrozi metalice și picioare.	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă ca picioarele dvs., goale sunt în contact bun cu toți cei 4 electrozi.• Măsurarea o faceți desculț. Scoateți-vă pantofii și șosetele.• Dacă picioarele dvs., sunt foarte uscate, umeziți-le ușor.• Îndepărtați de pe talpă toate părțile aspre ale pielii
Eroare de măsurare a greutateii.	<ul style="list-style-type: none">• Cântarul nu este așezat pe o suprafață plană.• Verificați unitatea de măsură selectată.• Efectuați calibrarea	<ul style="list-style-type: none">• Cântarul trebuie așezat pe o suprafață plană și solidă. Evitați covoarele și alte suprafețe moi.• Setati unitatea corectă în aplicație, kg / lb / st.• Calibrare: Prin apăsarea de centru a cântarului, activați cântarul, așteptați aproximativ 10 secunde până când cifrele „0.0” nu dispar de pe ecranul LCD. Mai multe informații găsiți în capitolul „2. Calibrare”.
Aplicația nu s-a conectat cu cântarul.	Există o problemă de conexiune Bluetooth între cântar și telefon mobil.	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată.• Verificați dacă bateriile sunt introduse în cântar și dacă sunt funcționale.• Opriți alte dispozitive Bluetooth.• Amintiți-vă că la cântar poate fi conectat doar un singur dispozitiv.• Închideți aplicația și Bluetooth pe alte dispozitive care utilizează cântarul.