

Használati utasítás

Intelligens személyes mérleg



A mérleg üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

1. Üzembe helyezés

Az eszköz tápellátását három darab AAA típusú, 1,5 V elem biztosítja. Első használat előtt húzza ki az elemtartó rekesz szigetelőcsíkját. Új elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra és zárja le az elemtartó rekesz fedelét.



2. Kalibrálás

A mérleget kalibrálni kell első használata előtt, illetve áthelyezése után. A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot a mérleg közepén és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a nulla (0,0) ábrázolás. Most álljon a mérlegre és mérje meg magát. Ha a mérleg a helyén marad, nincs szükség további beállításokra. Csak álljon rá a mérlegre, ha meg szeretné mérni a súlyát.

3. Figyelmeztetés

Szívritmus-szabályozót vagy más jellegű orvosi mérőeszközt használó személyek nem használhatják ezt a készüléket, mert a mérleg megzavarhatja az eszköz helyes működését. Terhes nőknek nem javasoljuk az eszköz használatát a testi funkciók elemzésére. A terméket felnőtt személyek és 10 évnél idősebb gyermekek használhatják.


Használat és karbantartás

- A mérleg 8 felhasználó adatait képes tárolni.
- Helyezze a mérleget egy szilárd és egyenes padlóra. Kerülje a szőnyeget és puha felületeket.
- A mérleg nem vízálló. Ne tegye ki nedvesség hatásának.
- A tisztításhoz használjon egy benedvesített szövetet.
- Ne használjon vegyszereket vagy súrolószereket.
- Vegye ki az elemeket a mérlegből, ha hosszabb ideig nem használja azt.
- A mérleggel nem játszhatnak gyermekek.




4. Bemutató

LCD kijelző

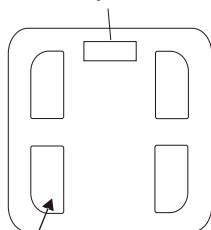

4 db fémlelektroda

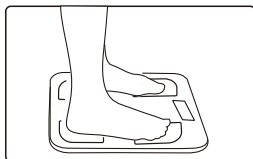

Vesse le a cipőjét és zokniját, és ügyeljen, hogy mindkét mezítelen talpa érintse a fémlelektrodákat

5. Műszaki paraméterek

- 5-1. Maximális súly: 200 kg / 440 font/ 31st: 7 font
- 5-2. Minimális súly: 5 kg / 11 font
- 5-3. Mérési pontosság: 0,1 kg/0,2 l/font 5-4. Túlterhelés kijelzés: **Err**
- 5-4. Túlterhelés kijelzés: **Err**
- 5-5. Gyenge elem kijelzés: **Lo**
- 5-6. Impedancia hiba: **Err1**, lásd „12. fejezet Hibaelhárítás“.
- 5-7. Tárolható felhasználók: 8 személy
- 5-8. **(fat)** Mer Testzsírmérés: 5 % ~ 50 %
- 5-9. **(TBW)** Testvízhányad mérése: 10 % ~ 80 %
- 5-10. **(MUS)** Izomtömeg mérése: 10 % ~ 80 %
- 5-11. **(BONE)** Csonttömeg mérése: 0,5 kg ~ 8,0 kg
- 5-12. **(BMI)** Testtömeg-index
- 5-13. **(KCAL)** Napi kalóriaszükséglet
- 5-14. **Bekapcsolás:** Álljon rá a mérlegre, a mérleg automatikusan bekapcsol.
- 5-15. **Automatikus kikapcsolás:** ha 10 másodpercig nem használja a mérleget, akkor az automatikusan kikapcsol.



6. Az alábbi operációs rendszerekkel használható



iOS 8.0



Android 4.3

7. Alkalmazás (AiFit)

A mérleg a Bluetooth-on keresztül csatlakozik az alkalmazáshoz. Az **AiFit** alkalmazás az Android és iOS rendszerekhez letölthető a Google Play (Android) és APP Store (iOS) áruházakból.

Az „AiFit“ alkalmazást a QR kód beolvasásával is letöltheti.




8. Megjegyzés

A mérleg több eszközzel párosítható, de a méréseket csak egy eszköznek lehet elküldeni. Ha a mérleget két felhasználó használja, akkor nem lehet egyszerre két alkalmazáshoz csatlakoztatni. Ha egy másik felhasználó akar csatlakozni, az elsőnek ki kell kapcsolnia az alkalmazást és a bluetooth-t is.

9. Üzemeltetési utasítások

- 1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon / táblagépen. A mérleg tétlen maradhat.
- 2. Indítsa el az alkalmazást. Hozzon létre egy felhasználói fiókot (email cím, jelszó), vagy jelentkezzen be, ha már regisztrálta magát.
- 3. Az alkalmazás automatikusan megtalálja a mérleget, csatlakozik hozzá, és hozzárendeli a fiókjához. A mérleg minden bekapcsolásánál az alkalmazás automatikusan csatlakozik, ha a mérleg a telefon/táblagép közelében van.

10. Interfész

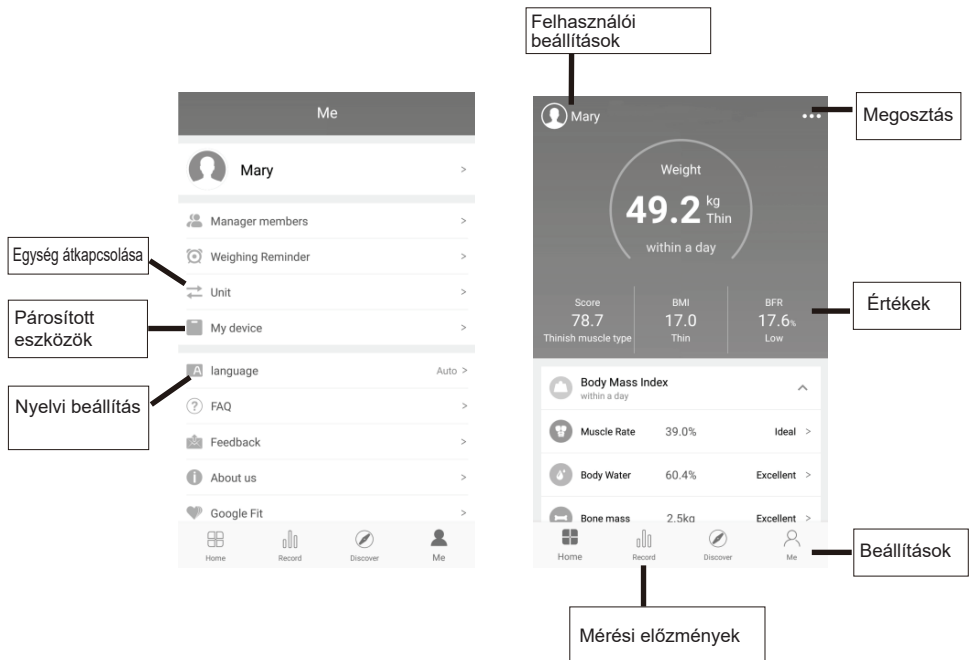

10-1. Felhasználói beállítások

A felhasználói beállításokban új profilokat lehet hozzáadni vagy szerkeszteni. Minden felhasználónak saját mérési előzményei vannak. A mérleg 8 felhasználót képes azonosítani.

10-2. Mérési előzmények

A mérési előzményekben el tudja olvasni a profilba elmentett összes korábbi mérést. Egyben az összes paraméter átlagértékét is megtekintheti.

10-3. Beállítások

Az alkalmazásbeállítások lehetővé teszik az alkalmazás testreszabását a saját igényei szerint: egység átalakítása (kg / lb / st), mérés-émlékeztető, mérlegek bekötése (Bind, Unbind), rendszerfrissítés, nyelvbeállítás stb.



Megjegyzés

A mérleg csak a mobilalkalmazással történő első párosítás után jeleníti meg az adatokat.


11. A mérleg használata

11-1. Nyissa meg az alkalmazást, regisztrálja a felhasználót, állítsa be a felhasználói adatokat és csatlakoztassa a bekapcsolt mérleget.


11-2. Ha befejezte a beállításokat a telefonon, vesse le a cipőjét, zokniját és mérje meg magát. Ügyeljen, hogy mezítelen talpai érintsék a fémelektrodákat. Mérés után a mérleg automatikusan kikapcsol.

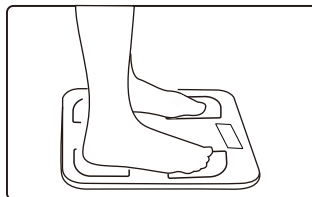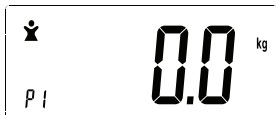


11-3. Várjon, amíg a kijelző megjeleníti a súlyát. Maradjon a mérlegen, amíg a kijelző a többi értéket is megjeleníti.

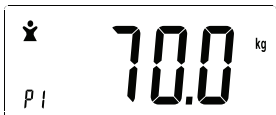

11-4. Pár pillanat után balról jobbra egyenként eltűnik a négy „0”. Várjon, amíg a többi érték is ábrázolásra kerül.

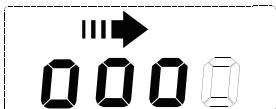

11-5. Az értékek fokozatosan, egymás után jelennek meg. Most már leszállhat a mérlegről. Az LCD kijelzőn megjelenik a testsúly, BMI, testzsír-százalék, testvíz-százalék, izomtömeg-százalék, csonttömeg-százalék, az ajánlott kalóriák, majd ismét a testsúly. Az értékek kétszer jelennek meg az LCD-n.

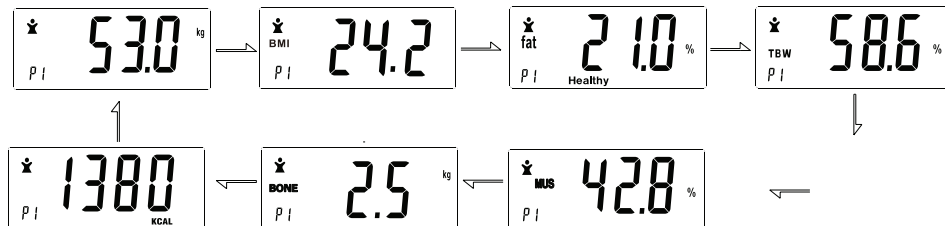

12. Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel a mérleg használata során, a márkaszerviz értesítése előtt tanulmányozza át a lenti táblázatot.

Probléma	Ok	Megoldás
Nem kapcsol be a mérleg.	Ellenőrizze az elemeket. 5 kg alatti súly.	<ul style="list-style-type: none">Helyezzen elemeket a mérlegbe, ha szükséges. Ellenőrizze az elemek polaritását.A minimális mérhető súly 5 kg.
Lo. -ábrázolás a kijelzőn.	Lemerült elemek.	Cserélje ki az elemeket.
Err -ábrázolás a kijelzőn.	A maximális megengedett súly túllépése.	A maximális megengedett súly 200 kg.
Err1% ábrázolás a kijelzőn.	A mérleg nem képes a testsúly leérése az elektródák és talpak érintkezésével.	<ul style="list-style-type: none">Mindkét mezíttelen talpa érintse a 4 fémelektrodát. A mérést mezítláb kell elvégezni. Vesse le a cipőjét és zokniját.Vizezze be a lábát, ha túl száraz.Távolítsa el a talpáról az elszarusodott bőrréteget.
Hiba a súly mérésénél.	<ul style="list-style-type: none">A mérleg nincs egyenes felületen.Ellenőrizze a mértékegységet.Végezze el a kalibrálást	<ul style="list-style-type: none">Helyezze a mérleget egyenes, szilárd felületre. Kerülje a szőnyeget vagy más puha felületet.Állítsa be az alkalmazásban a mértékegységet: kg / lb / st.Kalibrálás: Aktiválja a mérleget a középpont megnyomásával, várjon 10 másodpercet amíg eltűnnek a „0,0” számjegyek az LCD-ről. További információk: „2. Kalibrálás”.
Az alkalmazás nem csatlakozott a mérleghez.	Bluetooth-probléma a mérleg és alkalmazás között.	<ul style="list-style-type: none">Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.Ellenőrizze, vannak-e elemek a mérlegben és hogy működnek-e.Kapcsolja ki a többi Bluetooth eszközt.A mérleghez mindig csak egy eszközt lehet csatlakoztatni.Zárja be az alkalmazást és a Bluetooth-t más, a mérleget használó eszközökön.