


# Instrucțiuni de utilizare

## 1. Sursă de alimentare

Acest dispozitiv este alimentat de trei baterii AAA de 1,5 V. Când introduceți baterii noi, asigurați-vă că sunt introduse cu polaritate corectă și de fapt că, capacul bateriei este bine pus la loc.

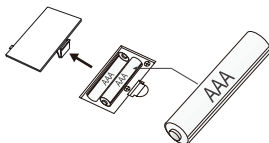

### **IMPORTANT**

Calibrarea este necesară dacă utilizați cântarul pentru prima dată, sau dacă l-ați mutat. Cântarul pornește prin apăsare în mijlocul lui, și așteptați până când pe ecran apare zero (0,0). Apoi vă puneți pe cântar și vă puteți cântări. Dacă cântarul rămâne în același loc, nu sunt necesare alte setări. Dacă doriți să vă cântăriți din nou, pur și simplu vă puneți din nou pe cântar.

## 2. Cântărirea

PASUL 1: Așezați cântarul pe o suprafață fermă și plană (nu îl așezați pe covor)

PASUL 2: Dacă utilizați cântarul pentru prima dată sau ați schimbat poziția acestuia, porniți-l apăsând în mijloc lui și așteptați până când pe ecran apare zero (0,0). Acest pas este utilizat pentru calibrare.

PASUL 3: Puneți-vă pe cântar și așteptați pe el. După câteva secunde, greutatea dvs., va începe să clipească pe ecran. Greutatea este afișată timp de 10 secunde. Apoi cântarul se oprește automat. Dacă doriți să vă cântăriți din nou, dați-vă jos și după o vreme vă puteți pune din nou pe cântar.



### 3. Date tehnice

- Unitate de măsură: kg | lb | st: lb
- Greutate maximă: 180 kg 1396 lb 128 st: 5 lb
- Greutate minimă: 5 kg / 11 lb
- Precizie de cântărire: 0,1 kg / 0,2 lb
- Dimensiuni ecran LCD: 74 x 30 mm
- Baterii: 3 x 1,5 V AAA
- Domeniu de măsurare: 5 kg - 180 kg (11 lb - 396 lb)
- Tehnologie: Step on technology
- Indicații: Baterii descărcate și indicator de suprasolicitare
- Dimensiuni: 302 x 302 x 31 mm

### 4. Selectarea unității

Acest cântar este echipat cu un comutator de unitate al greutății. În cazul în care doriți să comutați între unitățile metrice (kilograme) și cele britanice (libry sau stones), faceți acest lucru folosind comutatorul din spatele cântarului (kg -> lb -> st).



### 5. Pornire

Cântarul porniți prin utilizarea tehnologiei de Step on (prin punerea pe cântar, cântarul se pornește automat).

### 6. Opre

Dacă cântarul nu este utilizat, se oprește automat după 10 secunde.

### 7. Indicator de suprasolicitare

Dacă cântarul este supraîncărcat cu o greutate de (peste 180 kg), pe ecran apare inscripția „oL”. Îndepărtați greutatea pentru a proteja senzorii.



### 8. Indicator baterie slabă

Dacă pe ecranul LCD apare inscripția „Lo”, deschideți capacul bateriei și înlocuiți bateriile vechi cu altele noi



### 9. Sfaturi

1. Nu așezați cântarul pe un covor sau pe o altă suprafață moale.
2. Dacă nu veți utiliza cântarul pentru o mai lungă perioadă de timp, scoateți bateriile din el.
3. Curățați cântarul cu o lavetă ușor umedă. Nu-l scufundați în apă și nu utilizați detergenți chimici sau abrazivi pentru curățare.